

**my
life****Clickfine®**

mylife™ Clickfine® DiamondTip

Désormais disponible en longueur de 5 mm

- Pointe d'aiguille à 6 niveaux de biseautage pour une injection encore plus douce
- Canule à paroi extra fine pour un écoulement optimal du médicament¹
- Technologie Universal Click brevetée pour une fixation aisée et sécurisée
- Revêtement en silicone spécial pour un confort d'injection avancé
- Compatible avec toutes les grandes marques de stylos injecteurs²

**Nouveau****Clickfine®**
31G x 3/16"
0,25 x 5 mm
STERILE
Do not reuse
LOT / EXP

CE 1250

mylife™ Clickfine® DiamondTip 5 mm

31G/0,25 mm, Extra Thin Wall





Aiguilles courtes pour stylo injecteur

Injection sous-cutanée fiable

Pour bien maîtriser l'action de l'insuline, il est important de l'injecter dans le tissu adipeux sous-cutané (injection sous-cutanée) et non dans le muscle sous-jacent. L'injection de l'insuline dans le muscle peut induire des fluctuations inexplicables des valeurs de glycémie et entraîner une hypoglycémie grave.

- On observe une tendance à l'utilisation d'aiguilles pour stylo injecteur plus courtes.
- Des aiguilles pour stylo injecteur de 5 mm simplifient la technique d'injection. Les injections peuvent être administrées selon un angle de 90 degrés sans pli cutané (chez certains enfants, adolescents et adultes minces, la formation d'un pli cutané peut être nécessaire).³
- Les aiguilles pour stylo injecteur courtes réduisent le risque d'injections accidentelles dans le muscle qui peuvent entraîner une hypoglycémie grave.

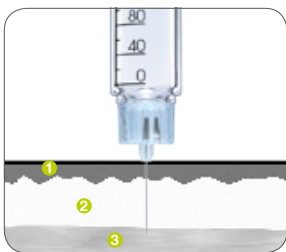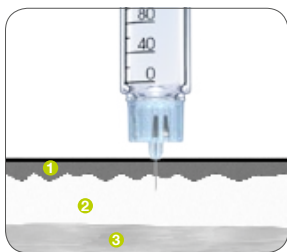

✓ Une aiguille pour stylo injecteur de 5 mm permet une injection sous-cutanée sûre, même sans formation de pli cutané. Suivez les recommandations de votre conseiller en diabète.

✗ Les aiguilles pour stylo injecteur longues augmentent le risque d'injection intramusculaire.



- 1 Peau (épiderme et derme) 2 Tissu adipeux sous-cutané
3 Muscle



Canule à paroi extra fine (ETW)

Pour un écoulement optimal du médicament

Diamètre interne plus large pour un diamètre externe inchangé

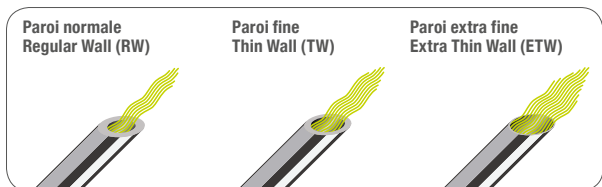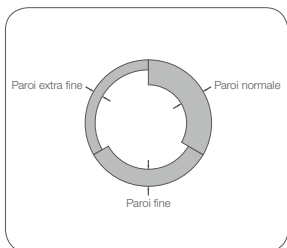



Clickfine®

- Amélioration du traitement grâce à un écoulement plus rapide¹
- Le diamètre interne plus large de la canule permet d'appliquer moins de force sur le bouton d'injection¹
- Permet l'administration simple d'insuline très concentrée, à partir de 200 unités/ml

Article	Contenu	Diamètre de la canule
mylife™ Clickfine® DiamondTip 4 mm	100 pièces	32G/0,23 mm, Extra Thin Wall
mylife™ Clickfine® DiamondTip 5 mm	100 pièces	31G/0,25 mm, Extra Thin Wall
mylife™ Clickfine® DiamondTip 6 mm	100 pièces	31G/0,25 mm, Thin Wall
mylife™ Clickfine® DiamondTip 8 mm	100 pièces	31G/0,25 mm, Thin Wall
mylife™ Clickfine® 10mm	100 pièces	29G/0,33 mm, Thin Wall
mylife™ Clickfine® 12mm	100 pièces	29G/0,33 mm, Thin Wall

¹ Aronson R. et al: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings, *Clinical Therapeutics*, 35(7):923-933, 2013.

² Tous les stylos injecteurs compatibles sont testés selon la norme ISO 11608-2:2012. Se référer à la liste de stylos injecteurs sur la boîte d'aiguilles ou visiter le site Internet www.mylife-diabetescare.com.

³ Suivez les recommandations de votre conseiller en diabète.

Plus de **liberté.**
Plus de **confiance.**
Avec **mylife™**.



Lecteurs pour
autosurveillance
glycémique



Systèmes pour
perfusion



Aiguilles pour stylo
et aiguilles sécurisées
pour stylo



Accessoires
et services

mylife™ est une gamme de produits et de services pour les personnes souffrant de diabète. Elle leur offre tout le nécessaire pour assurer un traitement autonome simple et fiable, qui leur offre plus de liberté et de confiance pour la vie qu'ils rêvent de mener.

Novembre 2017

mylife™ Clickfine® – aiguilles à stylo, stériles, non réutilisables, destinées à l'injection parentérale de médicaments.

Mandataire UE: Ypsomed AG

Pour un bon usage de ce produit, lire attentivement les recommandations d'utilisation. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien pour toute question au sujet de ce dispositif médical. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Ypsomed S.A.S // 18 – 20, rue Soleillet // 75020 Paris //

info@ypsomed.fr // www.mylife-diabetescare.fr // Service clientèle: 0800 883058